Przygotowanie urządzenia do zmiany czasu letniego i zimowego

Dla użytkowników PDM

Zmień datę i godzinę w PDM dopiero po usunięciu aktualnego zbiornika na insulinę i przed aktywacją nowego.

Dla użytkowników EasyPatch, EasyTouch

W ustawieniach smartfona włącz automatyczne ustawianie daty i godziny. Dzięki temu telefon sam zaktualizuje godzinę po zmianie czasu, bez ręcznej regulacji.


Niezależnie od używanego urządzenia, zawsze sprawdź poprawność daty i godziny po zmianie czasu.

1. Dla użytkowników EasyPatch, EasyTouch

Upewnij się, że smartfon ma połączenie z Internetem oraz włączone automatyczne ustawianie daty i godziny. Po zmianie czasu godzina zaktualizuje się automatycznie.



iOS

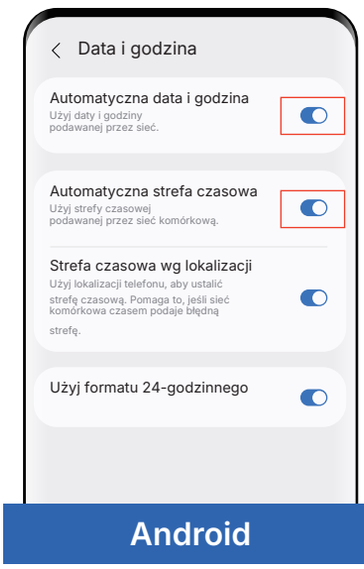


Android

Uwaga: Ekrany ustawień Androida mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Simplifying Diabetes

Medtrum

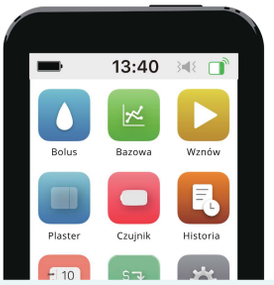

2. Dla użytkowników PDM

Ustawianie daty i godziny w PDM:

• Datę i godzinę w PDM można zmienić tylko wtedy, gdy zbiornik na insulinę nie jest aktywny. Ustawienia należy więc zmienić podczas wymiany zbiornika na insulinę.


• Jeśli korzystasz z Nano CGM, aby zmienić datę i godzinę w PDM, nie musisz odłączać go od PDM ani usuwać sensora.

1 Dezaktywuj i usuń zbiornik na insulinę

Przejdź do Menu główne → Patch → Dezaktywuj Patch

1) Jeśli zbiornik na insulinę jest aktywny, przesuń suwak, aby go dezaktywować.


2) Następnie odłącz pompę od ciała.

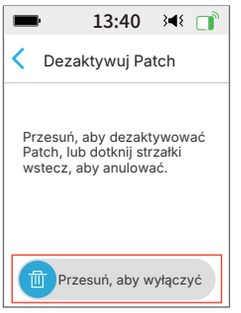

2 Zaktualizuj datę i godzinę

Przejdź do Menu główne → Ustawienia → Ogólne → Godzina/Data

Ustaw prawidłową datę i godzinę. Na każdym ekranie naciśnij „Gotowe”, aby zapisać zmiany.

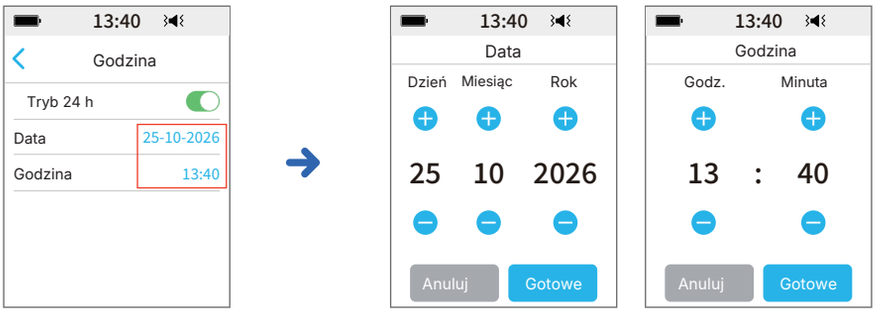

3 Aktywuj i załóż nowy zbiornik na insulinę

Wykonaj czynności aktywacji i założenia nowego zbiornika na insulinę. Pompa będzie podawała insulinę zgodnie z ustaloną dawką bazową, korzystając z godziny ustawionej w urządzeniu PDM.

Uwaga: Zawsze sprawdzaj, czy data i godzina w PDM są prawidłowe.

Simplifying Diabetes
Medtrum